

I. Betreff

Da sich die Situation verschlechtert und um einer Versorgungslücke von Mundschutzmasken abzuhelpen, wird eine Anfertigungsschablone für die Herstellung von Schutzmasken aus Stoff bereitgestellt.

Verwendungszweck:

- **Um sich zu schützen.**
- **Um weiterhin arbeiten zu können.**
- **Um die Aufrechterhaltung der Tätigkeit des Krankenhauses zu ermöglichen und weiterhin Patienten aufnehmen zu können.**

II. Betroffene Abteilungen und betroffene Fachkräfte.

Alle Mitarbeiter des CHUGA (Universitätsklinik in Grenoble)

- Abteilungen, die keine COVID-19 Patienten betreuen*
- Supportabteilungen

* Abteilungen, die COVID-19 Patienten betreuen, sind:

- *Abteilung für Infektionskrankheiten*
- *Reanimationsabteilung*
- *Pneumologie*
- *Abteilungen für Innere Medizin (3. A,B und C)*



III. Anfertigung und Pflege der Mundschutzmaske aus Stoff

Notwendige Materialien für die Anfertigung:

- Baumwollstoffreste (ca. 20 cm) für Außen und das Futter
- Dünnes Fleece, dünner Molton,..
- Nachgiebiges Gummiband



Die Pflegemaske wird aus 2 Baumwollschichten und einer, zwischen diesen beiden Baumwollschichten liegenden, Fleecegeschicht, erstellt.

Schnittmuster im Anhang


Pflege der Schutzmaske:

- Obliegt dem Benutzer.
- Schutzmaske täglich und mit herkömmlichen Waschmitteln bei 30°C zu Hause waschen.

IV. Nähanleitung Schritt für Schritt

1. Schnittmuster (s. Anhang) ausschneiden
2. Schneiden Sie die benötigten Baumwollstücke (s. Schnittmuster) aus: Sie erhalten 4 einzelne Stoffstücke.
3. Schneiden Sie das Fleece (s. Schnittmuster) zu : Sie erhalten 2 Fleecestücke.
4. Schneiden Sie 2 Gummibänder von etwa 30 cm für die große Variante ab (passen Sie die Länge je nach gewünschter Größe an).
5. Nähen Sie die beiden äußeren Stoffstücke "rechts auf rechts" bei der Rundung zusammen.
6. Nähen Sie die beiden Stoffstücke für das Futter auf die gleiche Weise zusammen.
7. Nähen Sie die beiden erhaltenen Stoffstücke "rechts auf rechts" zusammen und fügen Sie die beiden Fleecestücke ein. Nur oben und unten zusammennähen, die kurzen Seiten bleiben offen.
8. Wenden Sie das Ganze.
9. Steppen Sie die zentrale Naht (vertikal) ab.
10. Steppen Sie die obere und untere Kante, wenige Millimeter vom Rand, ab.
11. Schlagen Sie die kurzen Seiten um (2 Mal, 1 cm) - und bügeln Sie glatt.
12. Nähen Sie nur wenige Millimeter von der Falte entfernt, um einen Saum zu erhalten.
13. Für einen komfortableren Sitz, schieben Sie den Knoten in den Saum.



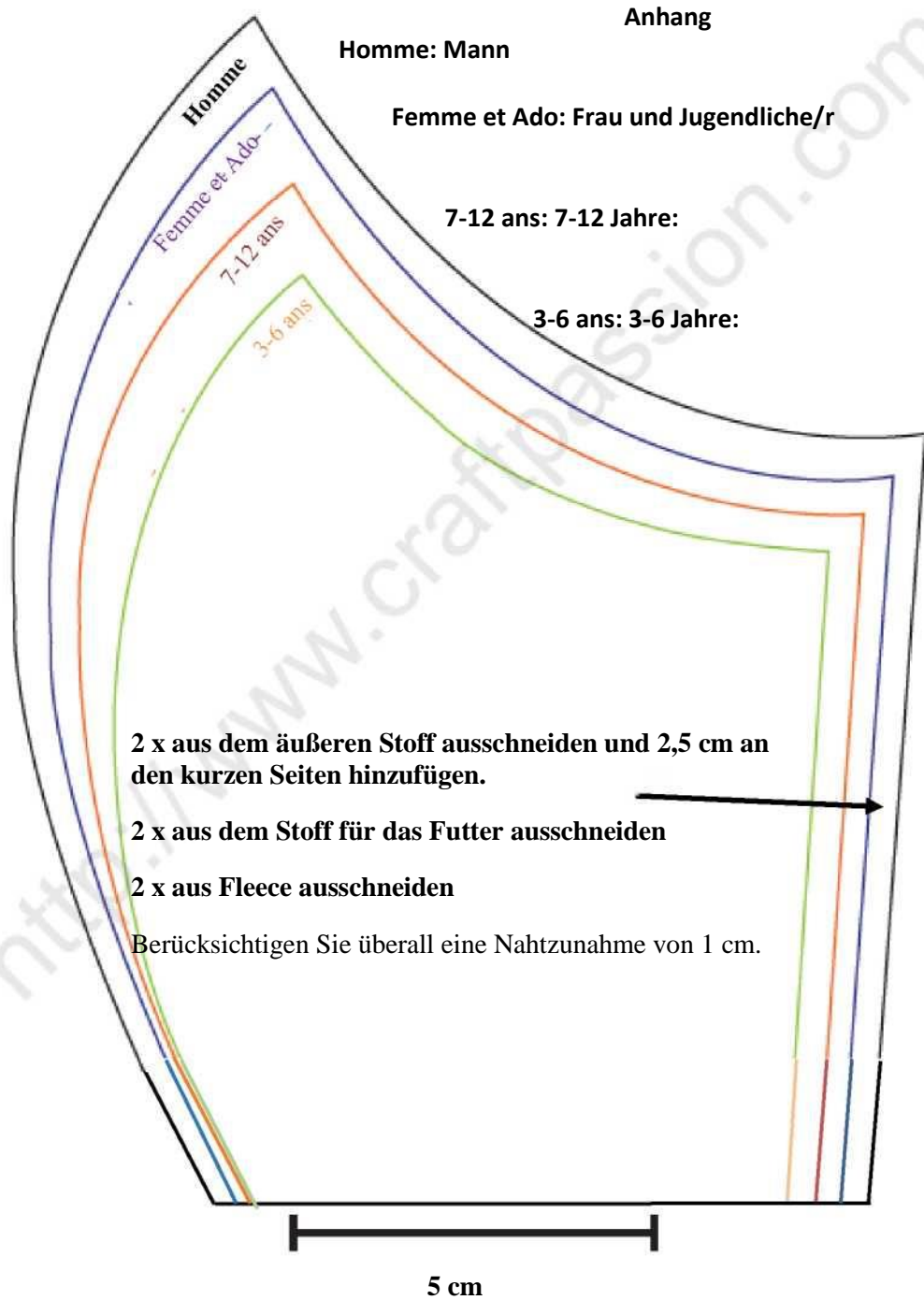

Messen Sie diesen Teil, bevor Sie die Schablone ausschneiden